


# 簡易マニュアル

これだけ読めば  
すぐに使える！

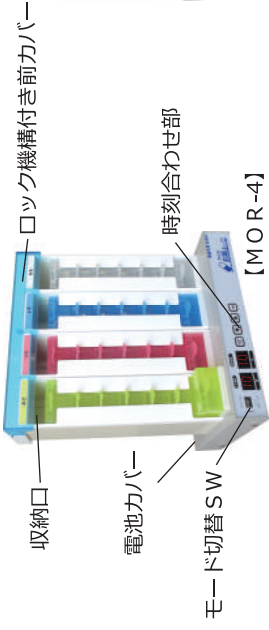

【MOR-4】

## 1 電池を入れます。




本機背面の電池カバーを外して、単一乾電池3本を入れます。  
(アルカリ乾電池推奨)

電池交換により時刻は消去されます。時刻の再設定をしてください。

取扱説明書  
4ページ

## 2 時刻を合わせます。

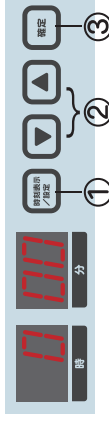

- 1 「時刻表示/設定」ボタン(図①)を長押しします。時が点滅します。
- 2 「▼」「▲」ボタン(図②)を押して時を設定します。
- 3 「確定」ボタン(図③)を押します。分が点滅します。
- 4 「▼」「▲」ボタン(図②)を押して分を設定します。
- 5 「確定」ボタン(図③)を押して設定完了です。

時刻表示は、電池を長持ちさせるため常時表示はしません。「時刻表示/設定」ボタンを押すと3秒間表示します。

取扱説明書  
5ページ

準備完了です。

## 決められた時間にお薬が自動で出てお知らせします！

お薬が出る時間は、出荷時に設定してあります。

朝：5時 昼：11時 夜：16時 寝：20：15 (MOR-4)

お客様ご自身で変更もできます。

取扱説明書  
7ページ



お薬供給プレート

お薬供給プレートは設定時刻から3時間(夜は4時間)出ています。お薬ケースを取り出しても、その時間が経過しないと収納されません。また、お薬ケースを取り出さなかった場合は、時間が経過するとお薬ケースは、再度収納されます。


飲み過ぎ  
飲み忘れ  
飲み間違い  
を防止します。

服薬支援 ROBO  
コックン®お薬よ



品番：MOR-4/MOR-3

## 3 朝・昼・夜・寝の 入切を設定します。

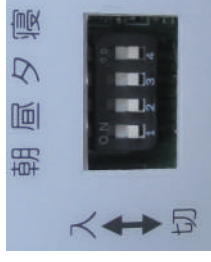

モード切替スイッチで、朝・昼・夜・寝の入切の設定ができます。  
(MOR-3は3パターン)  
例えば、昼を切って、朝・夜・寝ごとにお薬を出すことができます。

スイッチの入切は、素材が柔らかな「つまようじ」などをお使いください。

取扱説明書  
7ページ

## 4 薬を入れます。




収納口からお薬ケースを取り出します。お薬ケースにお薬を入れて、フタを確実に閉じて収納口からセットします。


フタは、「パチッ」となるまで確実に閉めてください。また、お薬をフタで挟まないよう注意してください。

取扱説明書  
8ページ

挟まっている

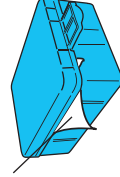

開いている

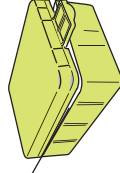


お薬をケースで挟んでいる。 **X**

ケースのフタが開いている。 **X**

## 飲み過ぎ防止の施錠について (MOR-4のみ)

MOR-4には、「ロック機構付き前カバー」が付いています。前カバー施錠することにより、お薬ケースを取り出すことができなくなります。

取扱説明書  
8ページ

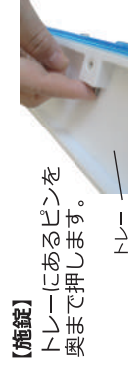

【施錠】  
専用キーを鍵穴に押し込むとロックが解除します。



【解錠】  
専用キーを鍵穴に押し込むとロックが解除します。

詳細は、**取扱説明書をご覧ください。**



株式会社 ミヤサカ工業

0120-383-509