

成分分量 次亜塩素酸ナトリウム 2%

成分に関連する注意

消毒する製品によっては印刷面、材質等を変色(変質)する場合がありますので注意してください。

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
 - ②小児の手の届かない所に保管してください。
 - ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
 - ④衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意してください。
 - ⑤使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 【貯法】遮光した気密容器。室温保存。

哺乳びん・ニプルの消毒方法

- ①哺乳びん・ニプルを授乳後すぐにブラシと食器用洗剤で洗い、水でよくすすいでください。
- ②哺乳びん・ニプルを消毒液(本剤の160倍液)中に完全に沈め、次の授乳まで1時間以上浸漬させます。消毒液は、24時間ごとに新しく調製してください。
- ③調乳の直前に哺乳びん・ニプルを取り出し、消毒液をよく振りまいて使用してください。

哺乳びん・ニプルの浸漬




哺乳びん・ニプルを、中に気泡が残らないように消毒溶液中に完全に沈め、次の授乳まで1時間以上浸漬させます。消毒液は、24時間ごとに新しく調製してください。

2%

500mL

ビーンスターク
**Bean
Stalk**

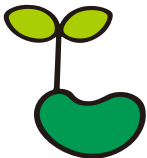

哺乳びん・乳首・医療器具等消毒液

ジアエン®液2%

次亜塩素酸ナトリウム2w/v%

第2類医薬品



使用上の注意 (使用前に必ずお読みください)

相談すること: 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位: 皮膚

症状: あれ、発疹・発赤、かゆみ

**まぜるな
危険**

酸性の洗浄・漂白剤、シアヌール酸系の製品と混合すると塩素ガスが発生して危険ですでおやめください。

効能効果・用法用量

効能効果	用法用量	濃度	消毒溶液 1L 調製時のジアエン液 2% の必要量
哺乳びん・乳首の消毒	哺乳びん・乳首を洗浄、水洗いした後、本剤の160倍液に1時間以上浸してください。	0.0125%	6.25mL
医療器具の消毒	本剤の40~100倍液に数分間浸すか、清拭してください。	0.02~0.05%	10~25mL
器具・物品などの消毒	本剤の40~100倍液に数分間浸すか、清拭してください。	0.02~0.05%	10~25mL
室内・便所・浴室の消毒	本剤の40~100倍液で清拭してください。	0.02~0.05%	10~25mL
排泄物の消毒	本剤の2~20倍液を用いてください。	0.1~1%	50~500mL

【用法用量に関連する注意】

- ①用法用量を厳守してください。(熱湯での希釈は避けてください。)
- ②目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- ③酸性の洗浄・漂白剤、シアヌール酸系の製品等との混合は危険なので避けてください。
- ④金属製の容器は、変質することがあるので、用いないでください。また、哺乳びん・サミ・スプーン等の金属製品や指輪等を消毒液につけることも避けてください。
- ⑤調製後、消毒液が変色した場合は、水質が本剤には不適当なので、その水での本剤の使用を避けてください。
- ⑥化学繊維、皮革、毛、絹製品への使用を避けてください。
- ⑦あやまって飲みこんだ場合は、すぐに水・生卵・ミルク等を飲み、医師に相談してください。


販売元: 雪印ビーンスターク株式会社
東京都新宿区本塩町13 TEL.0120-241-537
製造販売元: 健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

BeanStalk は、大塚製薬株式会社の商標です。

® 登録商標

キャップ: PP
パッキン: PE, PP
ボトル: PE
ラベル: PS

K0G9

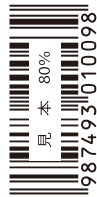

製造番号

使用期限